

microlet®

Barevné lancety • Kolorowe lancety
• Ланцети во боја



UPZOROVENÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Toto balení obsahuje malé části, které mohou být pro děti nebezpečné. Vždy používejte opatrně a nezapomínejte na bezpečnostní pokyny. Před použitím vždy zkontrolujte, zda je lanceta sterilní a nepoškozená. Pokud je poškozená, nepoužívejte ji. Před použitím vždy zkontrolujte, zda je lanceta sterilní a nepoškozená. Pokud je poškozená, nepoužívejte ji. Před použitím vždy zkontrolujte, zda je lanceta sterilní a nepoškozená. Pokud je poškozená, nepoužívejte ji.

90011294

Rev. 04/23




6603

Určené použití: Lanceta MICROLET® je jednorázové sterilní zařízení určené k odběru vzorku kapilární krve dospělého nebo dítěte pro sledování glykémie. Lanceta není určena k použití u novorozenců. • **Przeznaczenie:** Lancet MICROLET® to jednorazowy wyrób sterylny przeznaczony do pobierania próbki krwi włośniczkowej od osób dorosłych lub dzieci na potrzeby monitorowania stężenia glukozy. Lancet nie jest przeznaczony do stosowania u noworodków. • **Предвидена употреба:** Микролет® ланцетата претставува стерилен уред за еднократна употреба предвиден за извлекување примерок од капиларна крв од возрасно лице или дете за следење на нивото на гликоза. Ланцетата не е предвидена за неонатална употреба.


Návod / Instrukcja / Упатства:

Další informace o bezpečnosti a funkční způsobilosti najdete v návodu dodaném společně s odběrovým zařízením pro testování ze špičky prstu. • **Należy zapoznać się** z instrukcją wykonywania badania krwi pobranej z opuszki palca dostarczoną razem z nakłuwaczem oraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i skuteczności.


• **Разгледајте ги** упатствата обезбедени со вашиот уред за пунтура за да извршите тестирање во врот на прстот и за информации за дополнителна безбедност и изведба.

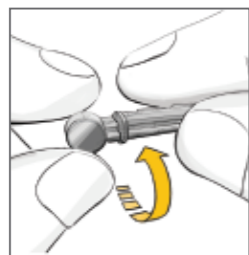

1

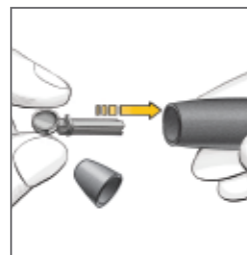

2

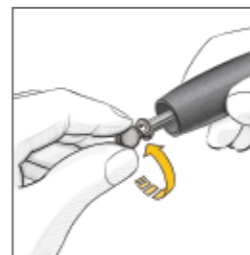

3

microlet®

Barevné lancety • Kolorowe lancety • Ланцети во боја

REF 90010262



Lanceta zůstává sterilní, dokud není odstraněn kulatý ochranný kryt. Nepoužívejte v případě poškození nebo neúmyslného otevření. Likvidujte vždy jako zdravotnický odpad.

Lancet pozostaje sterylny do momentu zdjicia nasadki ochronnej. Nie używaj lancetu w przypadku jego uszkodzenia lub przypadkowego otwarcia. Zawsze usuwaj zgodnie z zasadami usuwania odpadów medycznych.

Ланцетата е стерилна додека не се отстрани заштитниот капаче. Не користете доколку е оштетена или ненамерно отворена. Секогаш отстранувајте како медицински отпад.

microlet®

Barevné lancety • Kolorowe lancety • Ланцети во боја

Jednoduché a pohodlné testování
Proste, bezproblemowe badanie
Едноставно и непречено тестирање



200 (8x25)

Lancety potažené silikonem
Lancety powlekane silikonem
Ланцети обложени со силикон

CS • Používejte s řadou odběrových zařízení MICROLET®.
PL • Do stosowania z nakłuwaczami z grupy MICROLET®.
MK • Употребувајте со MICROLET® групата на уреди за пунтура.

© 2023 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Všechna práva vyhrazena. • Wszelkie prawa zastrzeżone. • Сите права се задржани.

Ascensia, logo Ascensia Diabetes Care a Microlet jsou ochranné známky a/nebo registrované ochranné známky společnosti Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
• Ascensia, logo Ascensia Diabetes Care i Microlet są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
• Ascensia, логото на Ascensia Diabetes Care, како и Microlet се трговски марки и/или регистрирани трговски марки на Ascensia Diabetes Care Holdings AG.



Dovozce a distributor:
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Novoborská 1800/136
142 00 Praha 4
Česká republika
Základní linka: +420 800 111 077
info@promedica-praha.cz

Importer i dystrybutor:
Ascensia Diabetes Care Poland Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 22 372 72 20
Bezpłatna infolinia dla pacjentów:
800 999 090
Od poniedziałku do piątku
W godz. od 9.00 do 17.00.
infolinia@diabetes.ascensia.pl

www.diabetes.ascensia.com

Vyrobeno v Polsku. • Wyprodukowane w Polsce. • Произведено во Полска.
Pokud během používání tohoto zařízení nebo v důsledku jeho používání dojde k závažné události, nahláste ji výrobci a/nebo jeho autorizovanému zástupci v místním území. • Jeśli w trakcie korzystania z tego wyrobku lub w wyniku jego używania dojdzie do poważnego incydentu, należy zgłosić go do producenta i/lub jego uprawnionego przedstawiciela oraz do właściwego organu krajowego. • Доколку се случи сериозна несреќа за време на употреба на овој уред или се јави несреќа како резултат од употребата на уредот, во молба прикажете ја несреќата на производителот и/или на неговиот овластен претставник, како и на соодветните државни органи.

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merz-Strasse 90
4002 Basel, Switzerland
Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l.
Via Varese, 162
20156 Milano, Italy



ASCENSIA
Diabetes Care

0°C 40°C



2797